

2022年2月3日

ご利用者様各位

株式会社アルメックス

アルメックス製顔認証付きカードリーダー「Sma-pa マイナタッチ」 アップデートリリースのお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

弊社製顔認証付きカードリーダー「Sma-pa マイナタッチ」におきまして、以下の内容にて配信アプリケーション経由でのアップデート配信を開始いたします。

1. アップデート内容

- ・ 本体起動時の初期化処理に関するタイムアウト設定値を見直しました。
- ・ 本体起動時の初期化処理エラー時にリトライ処理を追加しました。
- ・ マイナンバーカードの読み取り時におけるタイムアウト設定を廃止しました。
- ・ アップデート適用後に管理コンソールが起動しなくなる事象を修正しました。
- ・ 公費医療券読取機能の読取結果として画像ファイルを保存する機能を追加しました。
- ・ その他軽微な修正を行いました。

※以下、カードリーダー本体 1.3.6 にアップデート適用環境のみ対象事項です。

- ・ 薬剤情報提供同意ならびに特定健診情報提供同意で選択結果が正常に出力されない事象を修正しました。

2. アップデート方法

※事前にアップデート管理ツールが実行されているかご確認ください。

(図1の通り資格確認端末のタスクトレイにアイコンが表示されていること)



図1

①管理コンソール Ver1.1.11 以降をご利用の場合

配信アプリケーションからアップデートファイルが配信されますと、管理コンソールおよびマイナタッチ本体は次回起動時に自動でアップデートされます。

※配信アプリケーションによる自動アップデートは、支払基金から配布されている配信アプリケーションのインストールが必要です。

※弊社ユーザーサイト (<https://www.almex.jp/mc/mynatouch/>) から入手いただけるインストーラーも最新版に更新されておりますので、手動でアップデートいただくこともできます。

②管理コンソール Ver1.1.10 をご利用の場合

配信アプリケーションからアップデートファイルが配信されますと、図2の画面が表示されますので「はい」をクリックしてください。その後、資格確認端末を再起動して管理コンソールが起動すると図3の画面が表示されますので「はい」をクリックしてアップデートを実行します。アップデートが終了すると管理コンソールが起動して、カードリーダー本体のアップデートが自動で実行されます。

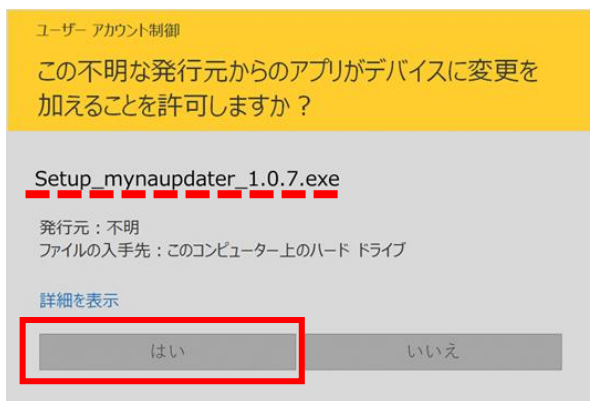


図 2

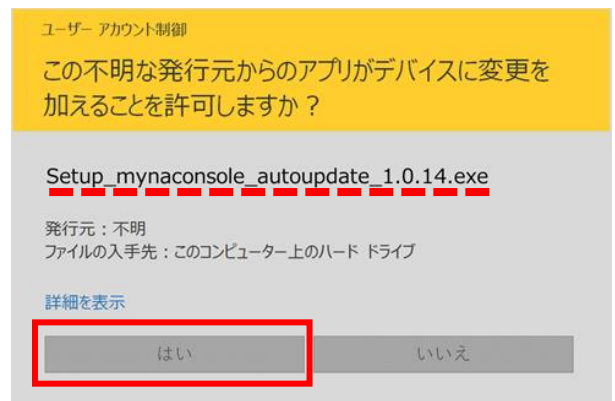


図 3

※今回のアップデートファイルは暗号化されているため、マイナタッチ本体バージョンが 1.3.4 以降の端末のみ対応となります。

3. アップデート適用後のバージョン

管理コンソール：1.0.14

アップデート管理ツール：1.0.7

カードリーダー本体：1.3.7

※本体画面上表記：392.2.70

バージョン情報			
◆バージョン情報◆			
システム	デバイスID	バージョン	
管理コンソール		1.0.14	
アップデート管理ツール		1.0.7	
カードリーダー本体	F0alm01	1.3.7	更新予約

本件につきましてご不明な点などありましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

電話でのお問い合わせ 050-5811-6358

メールでのお問い合わせ mynatouchsupport@almex.jp